

El sistema Quidel Triage



Automatizado. Calibrado. Conectado.
Diagnóstico profesional en el punto de atención




El sistema Quidel Triage

Resultados cuantitativos rápidos en unos
15-20 minutos*



Quidel Triage MeterPro se utiliza en miles de centros médicos en todo el mundo. Un menú de prueba exhaustivo que proporciona las respuesta de diagnóstico que necesita para tomar decisiones terapéuticas rápidas, eficaces a nivel de costo, en el punto de atención (PdA).

*excepto para la detección de drogas TOX

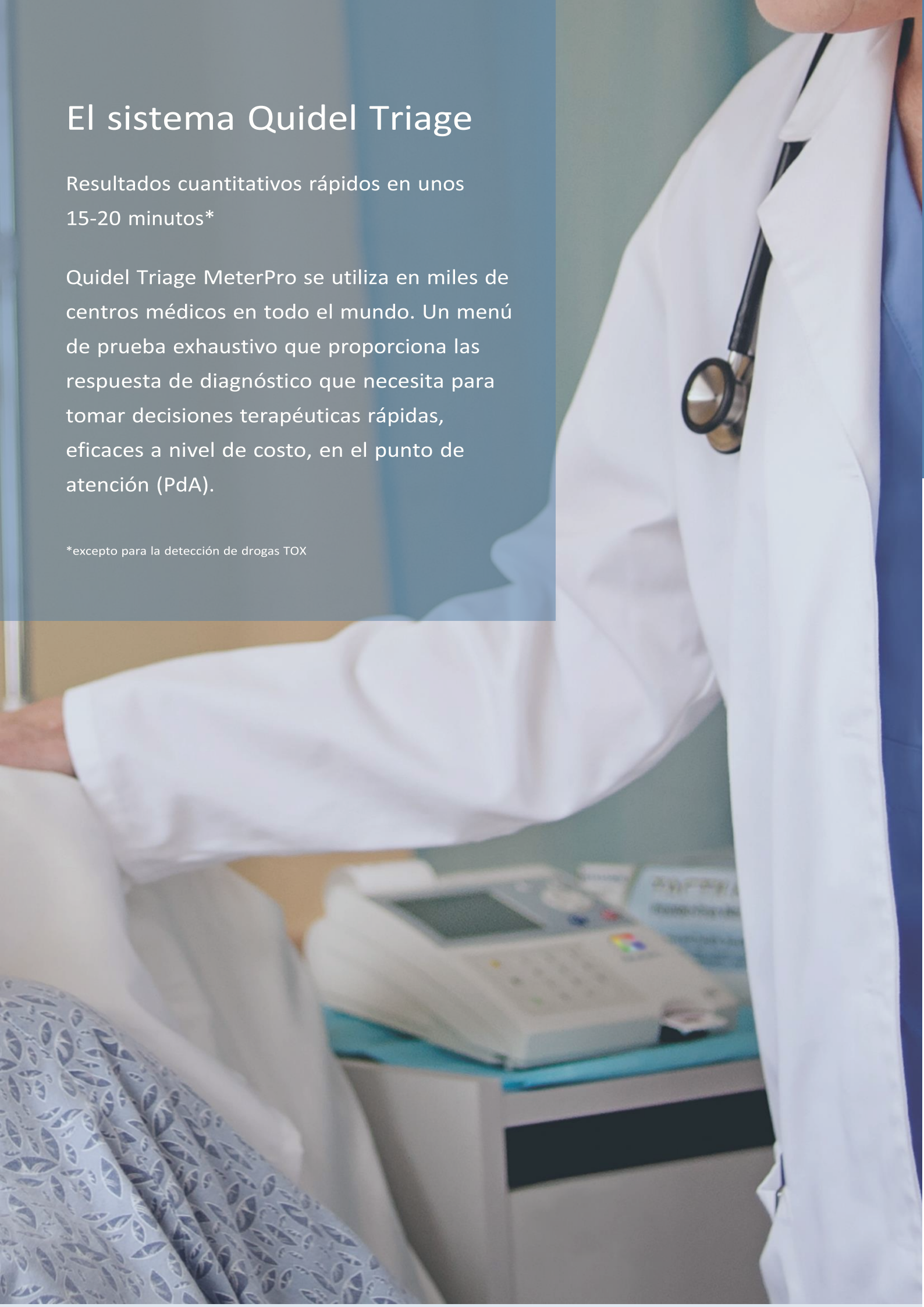

Cardiovascular

El sistema Quidel Triage puede acelerar la toma de decisiones para las afecciones médicas más críticas, incluida la insuficiencia cardíaca, el síndrome coronario agudo, el infarto de miocardio y los episodios tromboembólicos.

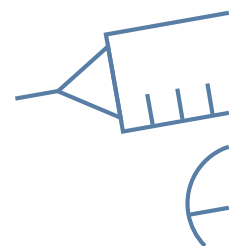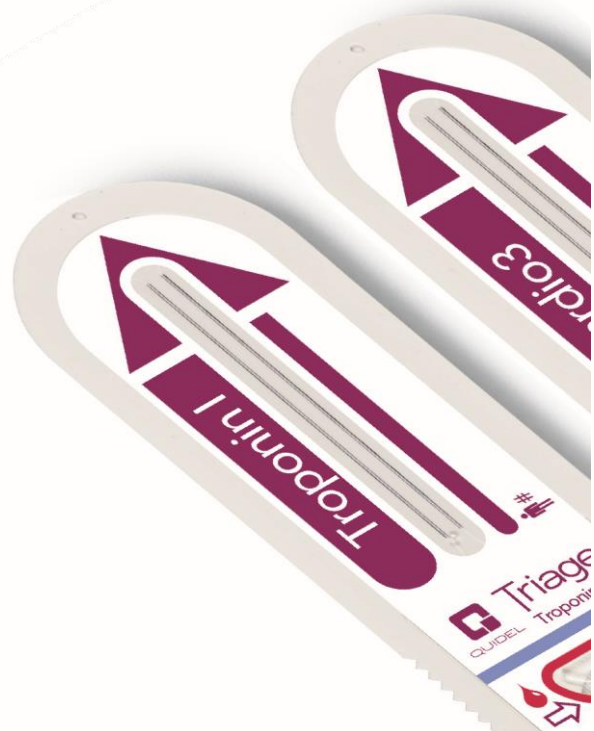

Intervalo cuantificable


Prueba/dispositivo de panel	Mioglobina	CK-MB	Troponina I	BNP	Dímero D	NT-proBNP
Quidel Triage Cardiac Panel	5-500 ng/ml	1,0-80 ng/ml	0,05-30 ng/ml			
Panel Quidel Triage Profiler SOB™	5-500 ng/ml	1,0-80 ng/ml	0,05-30 ng/ml	5-5.000 pg/ml	100-5.000 ng/ml	
Quidel Triage Troponin I Test			0,01-10 ng/ml			
Quidel Triage Cardio2 Panel	0,01-10 ng/ml			5-5.000 pg/ml		
Quidel Triage Cardio3 Panel		1,0-80 ng/ml	0,01-10 ng/ml	5-5.000 pg/ml		
Quidel Triage BNP Test				5-5.000 pg/mL		
Quidel Triage NT-proBNP Test						20-35.000 pg/ml
Quidel Triage D-Dimer Test					100-5.000 ng/ml	



Procedimiento sencillo de la prueba

1

Añada la muestra del paciente utilizando la pipeta de transferencia que incluye cada kit.

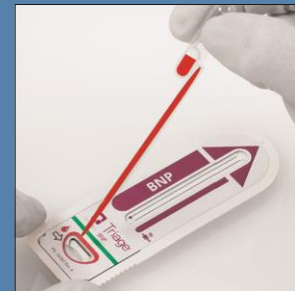

Quidel Triage TOX Drug Screen

Una prueba de detección que permite la determinación cualitativa simultánea de la presencia de una droga y/o de los metabolitos principales por encima de los umbrales de concentración de hasta 10 diferentes clases de drogas (11 ensayos únicos) en orina.

Umbral de concentraciones para los ensayos de fármacos

Acetaminofeno/paracetamol	APAP	5 µg/ml
Anfetaminas	AMP	1000 ng/ml
Metanfetaminas	mAMP	1000 ng/ml
Barbitúricos	BAR	300 ng/ml
Benzodiazepinas	BZO	300 ng/ml
Cocaína	COC	300 ng/ml
Metadona	MTD	300 ng/ml
Opiáceos	OPI	300 ng/ml
Fenciclidina	FCD	25 ng/ml
THC	THC	50 ng/ml
Antidepresivos tricíclicos	ATC	1000 ng/ml

2

Inserte el dispositivo de prueba en el Quidel Triage MeterPro.



3

Lea los resultados en la pantalla o pulse «Print» (Imprimir) para obtener una copia en papel.





Calidad de laboratorio a la velocidad en el PdA

- Resultados en unos 15-20 minutos
- Controles de calidad integrados en el medidor, software y los dispositivos de prueba.
- Calibración del ensayo específica de lote (a través del módulo CODE CHIP™ específico del lote)
- Disponibilidad de material de GC externo para garantía de calidad total.
- Bloqueos de GC y ID de usuario
- Posibilidad de realizar análisis de pacientes por lotes con varios dispositivos que permiten que el dispositivo de la prueba ejecute la prueba en los 30 minutos siguientes a la adición de la muestra.
- Muestras de sangre, plasma u orina.

Operación sencilla, bajo mantenimiento

- No requiere ninguna experiencia especial ni entrenamiento exhaustivo.
- Lector del código de barras para la ID del usuario y del paciente.
- No es necesario ningún mantenimiento, salvo cambiar el papel y la pila, y limpiar la superficie externa periódicamente.
- Los resultados cuantitativos del panel diagnóstico se visualizan e imprimen en números que son fáciles de leer y aparecen resaltados* cuando el resultado es superior al valor esperado.
- Los resultados cualitativos del panel diagnóstico se visualizan e imprimen como positivos (POS) o negativo (NEG), lo que elimina la necesidad de interpretar entre líneas.

Conectividad a través del sistema avanzado de gestión de pruebas (ATM) Quidel Triage Census®

- Solución integral para monitorizar y controlar los sistemas Quidel Triage, proporcionando informes de datos, control del medidor y del usuario y análisis de CC.
- Módulo flexible de interconexión que se puede utilizar para comunicarse con sistemas de terceros.

* salvo para la prueba de determinación del dímero-D

El sistema Quidel Triage está diseñado para ofrecer

resultados rápidos y de manera fácil. ■

Flexibilidad con paneles de prueba personalizables a través de la función Test Select™ (opción para seleccionar las pruebas tal como sea necesario).

Elimina la subjetividad de la interpretación humana con datos objetivos en un sistema de prueba automatizado, lo que puede acelerar la toma de decisiones cerca del paciente.

Menos tiempo en obtener los resultados lo que puede contribuir a la distribución más rápida de pacientes, estancias más cortas y mayor rendimiento del ED.

Lista de productos del sistema Quidel Triage

Producto	Cantidad	N.º de art.
Pruebas y controles		
Quidel Triage Cardiac Panel*	25 cada uno	97000HSEU
Quidel Triage Profiler SOB™ Panel*	25 cada uno	97300EU
Quidel Triage BNP Test*	25 cada uno	98000XREU
Quidel Triage D-Dimer Test*	25 cada uno	98100EU
Quidel Triage Total 5 Control 1	5 viales (5 viales de 0,25 ml cada uno)	88753
Quidel Triage Total 5 Control 2	5 viales (5 viales de 0,25 ml cada uno)	88754
Quidel Triage Troponin I Test*	25 cada uno	98600EU
Quidel Triage Cardio2 Panel*	25 cada uno	97500EU
Quidel Triage Cardio3 Panel*	25 cada uno	97400EU
Quidel Triage Total 3 Control 1*	5 viales (5 viales de 0,25 ml cada uno)	88733
Quidel Triage Total 3 Control 2*	5 viales (5 viales de 0,25 ml cada uno)	88734
Quidel Triage NT-proBNP Test*	25 cada uno	98700EU
Quidel Triage NT-proBNP Control 1*	5 viales (5 viales de 0,25 ml cada uno)	98713EU
Quidel Triage NT-proBNP Control 2*	5 viales (5 viales de 0,25 ml cada uno)	98714EU
Quidel Triage TOX Drug Screen*	25 cada uno	94400EU
Quidel Triage TOX Drug Screen Control 1	5 viales (5 viales de 0,25 ml cada uno)	94413
Quidel Triage TOX Drug Screen Control 2	5 viales (5 viales de 0,25 ml cada uno)	94414
Instrumentos y accesorios		
Quidel Triage MeterPro	1 cada	55071
Escáner de código de barras del Quidel Triage MeterPro	1 cada	52142

Adaptador en Y del Quidel Triage MeterPro	1 cada	52098
Papel para impresora del sistema Quidel Triage	1 cada	52031
Chip de códigos de supervisor del sistema Quidel Triage	1 cada	80035
Software de gestión de datos del censo Quidel Triage	Kit	55069

*No está a la venta en EE. UU.



Int. Camusso N°30
Mar del Plata

pedidos@delacanalinsumos.com